

# GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR HAUTPFLEGEGERÄT

# BEAUTY SKIN



Art.-Nr. 588 493  
Prod.-Nr. 95 2604 00

**Achtung: Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.**

## Einführung

Was ist und was bewirkt **BEAUTY SKIN** ?

- **BEAUTY SKIN** ist ein hochwirksames Verfahren zur kosmetischen Behandlung von Pickeln und Mitessern.
- **BEAUTY SKIN** basiert auf dem positiven Effekt, den Licht mit bestimmten Wellenlängen auf die menschliche Haut ausübt.
- Blaues Licht dringt bis zu den Pickel und Mitesser verursachenden Bakterien (*Propionibacterium acne*) in die Haut ein.
- Es wirkt antibakteriell und verhindert die weitere Entstehung von Pickeln und Mitessern.
- Rotes Licht vermindert Hautentzündungen, entspannt und stimuliert die Haut positiv.
- Die Kombination und die gleichzeitige Anwendung beider Lichtfarben erzeugt den besonderen Effekt von **BEAUTY SKIN**.
- **BEAUTY SKIN** wirkt ohne UV-Strahlung.

## Sicherheitshinweise

- Ziehen Sie vor allen Arbeiten, die Sie an dem Gerät vornehmen, den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie **BEAUTY SKIN** nicht in feuchten Räumen, nicht im Badezimmer und nicht in der Nähe eines Schwimmbeckens auf.
- **BEAUTY SKIN** darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen betrieben werden.
- Setzen Sie während der Anwendung von **BEAUTY SKIN** die mitgelieferte Schutzbrille auf.
- Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen Leuchtstoffröhren (Lampen) und den betroffenen, zu bestrahlenden Hautpartien mindestens 10 cm betragen muss.
- Bitte beachten Sie: Bestimmte Medikamente können die allgemeine Reaktion des Körpers auf Licht beeinflussen. Im Zweifelsfall konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.
- Falls Sie nach oder während der Anwendung von **BEAUTY SKIN** unangenehme Hautreaktionen bemerken, stoppen Sie die Anwendung unverzüglich und suchen Sie einen Dermatologen auf.
- Berühren Sie während der Anwendung nicht die Lampen. Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.

- Lassen Sie **BEAUTY SKIN** abkühlen (ca. 15 Min), bevor Sie das Gerät in geschlossene Behältnisse (z.B. in der Originalverpackung) verstauen.
- Öffnen Sie das Gehäuse von **BEAUTY SKIN** nicht. Reparaturarbeiten am und im Gerät sollte ausschließlich unser Kundendienst durchführen.
- Vor Auswechseln der Leuchtstoffröhren (Lampen) bitte Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Reinigen Sie **BEAUTY SKIN** nur mit einem angefeuchteten Tuch und tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Elektrische Geräte sind kein Spielzeug. Bewahren Sie **BEAUTY SKIN** außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


## Netzanschluss

Achten Sie vor Inbetriebnahme darauf, dass die länderspezifische Netzspannung mit der auf dem Leistungsschild angegebenen Betriebsspannung des Gerätes übereinstimmt.

## Anwendungshinweise

- Stellen Sie **BEAUTY SKIN** an einem standsicheren Platz in geeigneter Höhe auf.
- Reinigen Sie die betroffenen Hautpartien mit einer pH-neutralen Seife und trocknen Sie die Haut gründlich ab.
- Während der Anwendung von **BEAUTY SKIN** sollten sich keine Rückstände von Kosmetika auf der Haut befinden. Verwenden Sie keine Sonnencreme!
- Die Wirkung von **BEAUTY SKIN** wird nicht durch UV-Strahlung erzielt.
- Stecken Sie den Netzstecker von **BEAUTY SKIN** in die Steckdose.
- Setzen Sie die Schutzbrille auf und setzen Sie sich im Abstand von ca. 15 cm mit den betroffenen Hautpartien vor **BEAUTY SKIN**.
- Drehen Sie den Einstellknopf der Zeitschaltuhr nach rechts, bis der Zeiger auf die gewünschte Anwendungszeit zeigt. Damit ist **BEAUTY SKIN** eingeschaltet und die Zeitschaltuhr läuft. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich **BEAUTY SKIN** automatisch ab.
- Eine Erstverschlimmerung der Symptome ist normal und ein Zeichen der Wirkung.

**Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir eine tägliche Behandlung der betroffenen Hautpartien von jeweils 15 Minuten.**

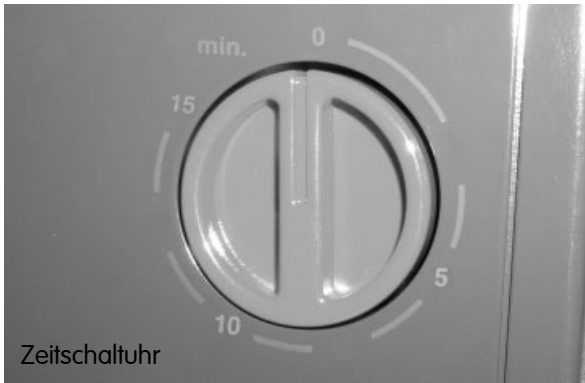

- Entspannen Sie sich und lassen Sie das Licht auf Ihre Haut wirken.
- Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Nach der Anwendung mit **BEAUTY SKIN** empfehlen wir, dass Sie die behandelten Hautpartien mit einer nicht fettenden Lotion eincremen.
- Den besten Effekt erzielen Sie, wenn Sie **BEAUTY SKIN** über einen Zeitraum von mindestens 8 Wochen pro betroffener Hautpartie täglich 15 Minuten anwenden. Für die Wirksamkeit ist die regelmäßige Anwendung entscheidend. Optimale Ergebnisse sind im allgemeinen nach 12 Wochen erreicht.

### Nutzungsdauer der Lampen

Die Dr. Kern Spezial-Leuchtstofflampen haben eine Nutzungsdauer von maximal 250 Stunden. Nach dieser Zeit leuchten sie zwar noch, jedoch ist die Strahlung so weit geschwächt, dass die Lampen ausgewechselt werden sollten.

### Auswechseln der Leuchtstoffröhren (Lampen)

Das Auswechseln der Lampen ist leicht und wird wie folgt durchgeführt (bitte nur Original Dr. Kern-Lampen verwenden):

- **Unbedingt Netzstecker aus der Steckdose ziehen.**
- Vier Befestigungsschrauben für die Blende an der Geräterückseite herausdrehen und Blende abnehmen.
- Jede Lampe soweit drehen, dass diese aus den Fassungschlitzten nach vorne herausgenommen werden kann.
- Neue Lampen einsetzen, indem man die Kontaktstifte oben und unten gleichzeitig in die Fassungsschlitzte schiebt und die Lampen anschließend eine Viertelumdrehung um ihre Achse dreht.

### Auswechseln der Starter

- Das Auswechseln der Starter ist sehr einfach durchführbar. Die Starter sollten bei jedem Lampenwechsel mit erneuert werden. Der Starter wird aus seiner Fassung durch leichtes Eindrücken und geringer Linksdrehung herausgenommen.

### Wartung

- Vor allen Reinigungsarbeiten und dem Leuchtstoffröhrenwechsel ziehen Sie bitte unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.
- Die Lampen und den Reflektor sollten Sie regelmäßig mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.
- Die roten und blauen Leuchtstoffröhren wurden speziell für **BEAUTY SKIN** mit der erforderlichen Wellenlänge entwickelt. Sie sind nur bei Dr. Kern erhältlich. Die Leuchtstofflampen sollten nach 400 Stunden Betriebsdauer ersetzt werden.

### Technische Daten

Anschluss-Spannung:	230 V <input type="checkbox"/>
Lampentyp:	Dr. Kern Spezial-Leuchtstofflampen blau (Spektrum 400-450 nm) rot (Spektrum 580-659 nm)
Lampenleistung:	15 W
Lampenlänge:	29 cm
Lampenanzahl:	6
Leistungsaufnahme:	100 W

## Reparatur

- Reparaturarbeiten am und im Gerät sollten ausschließlich vom Fachmann ausgeführt werden.

Unsere Serviceadresse finden Sie unten auf dieser Seite.

## Hinweise zur Verpackungsentsorgung

Alle von uns verwendeten Verpackungen und Packhilfsmittel sind mit dem Interseroh-Zeichen gekennzeichnet und sollten grundsätzlich der Wiederverwertung zugeführt werden.

Geben Sie die Papier-, Pappe- und Wellpappenverpackungen sowie die Kunststoffverpackungsteile in die dafür bereitgestellten Sammelbehälter.

### Gewährleistung

Die Gewährleistung wird nach den derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen übernommen.

### Herstellergarantie

- Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufbelegs und dauert grundsätzlich 12 Monate.
- Garantieleistungen erfolgen nur dann, wenn der zum Gerät gehörige Kaufbeleg vorgelegt werden kann.
- Bei Änderungen am Gerät, die ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen wurden, verfällt jeglicher Garantieanspruch.
- Für Defekte, die durch Reparaturen oder Eingriffe von nicht ermächtigten Personen oder durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, entfällt ebenfalls der Garantieanspruch.
- Bei Garantieansprüchen ist sowohl die Seriennummer sowie die Artikelnummer zusammen mit der Gerätebezeichnung und einer aussagkräftigen Fehlerbeschreibung anzugeben.
- Diese Garantie umfasst die Vergütung von defekten Geräteteilen mit Ausnahme normaler Verschleißerscheinungen.

Bei Beanstandungen ist das Gerät in der Originalverpackung oder einer entsprechend geeigneten Verpackung (ACHTUNG: Gefahr von Transportschäden) an unsere Service-Abteilung einzuschicken.


Senden Sie das Gerät stets mit diesem ausgefüllten Garantieschein ein.

Eventuell entstehende Beförderungskosten für die Ein- und Rücksendung können von uns nicht übernommen werden. Außerhalb Deutschlands wenden Sie sich im Falle eines Garantieanspruches bitte an Ihren Fachhändler. Eine direkte Garantieabwicklung mit unserem Servicecenter ist in diesem Fall nicht möglich.

Inbetriebnahme am:

Stempel und Unterschrift des autorisierten Elektroinstallateurs:

Als Packhilfsmittel sind von uns nur recyclingfähige Kunststoffe zugelassen, z.B.:

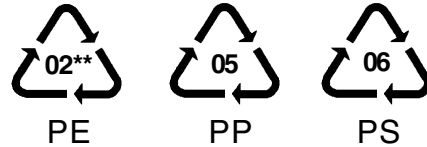

In den Beispielen steht:

PE für Polyäthylen\*\*  
02  $\Delta$  PE-HD;  
04  $\Delta$  PS-LD  
PP für Polypropylen  
PS für Polystyrol

### ACHTUNG!

Abfallgesetz vom 27.08.1986

Die Bestrahlungslampen gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen gesondert entsorgt werden (Sondermüll).

Die Entsorgung aus privaten Haushalten und dem gewerblichen Bereich ist durch Sondermüll-Sammelstellen der Kommunen möglich.

Es ist notwendig, die Lampen unzerstört der Entsorgung zuzuführen.

Hersteller:  
DR. KERN GMBH  
D-35759 Driedorf-Mademühlen

Serviceadresse:  
Dr. Kern GmbH  
Adolf Weiß Straße 43  
D-35759 Driedorf-Mademühlen  
Telefon: (0 27 75) 82 2 40  
Fax: (0 27 75) 8 24 55  
e-Mail: servicecenter@dr-kern.de  
Internet: www.dr-kern.de

Bitte diese Adresse zusammen mit der Montageanweisung gut aufbewahren.

Damit wir Ihre Fragen schnell und kompetent beantworten können, geben Sie uns immer die auf dem Typenschild vermerkten Daten wie Typenbezeichnung, Artikel-Nr. und Serien-Nr. an.